Смеситель медицинский вибрационный типа "Vortex" ("вортекс") V-3



Вортекс V-3 применяется для перемешивания компонентов жидкости в любых пробирках. Включение вортекса V-3 производится путем нажатия пробиркой в гнездо вортекса нажатием клавиш и постоянного встряхивания.

Во время работы гнездо вортекса производит орбитальное колебательное движение с амплитудой 4 мм. Конструкция обеспечивает устойчивость вортекса за счет максимального диаметра основания.

Минимальные габариты, бесшумность и простота управления обеспечивают широкий диапазон возможностей применения вортекса V-3 в медицине, биологии и т. д.






Адаптер для перемешивания 9 пробирок объемом от 1.5 до 2 мл.



Универсальный адаптер для перемешивания пробирок объемом от 0.5 до 50 мл.

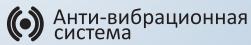

Технические характеристики

Скорость вращения гнезда	50 - 4,500 Об/мин
Амплитуда вращения гнезда	4 мм
Блок питания	12B - 1.5A AC/DC
Питание от сети	100 - 240 В; 50/60 Гц
Потребляемая мощность	18 Вт
Температурный режим	от +10 до +40 °C
Допустимая влажность при 20°C	80%
Размеры (Д x Ш x B)	130х 130х 58мм
Bec	0.7 Кг

